


Tomos para gases medicinales

Tomos para cabeceros, ambulancias y con caja de superficie o empotrable a pared.

- Bases comunes a todas las normas, con válvula de retención y posibilidad de ajuste del ángulo de alimentación.
- Disponibles para oxígeno, vacío, aire medicinal y protóxido de nitrógeno (otros gases consultar).

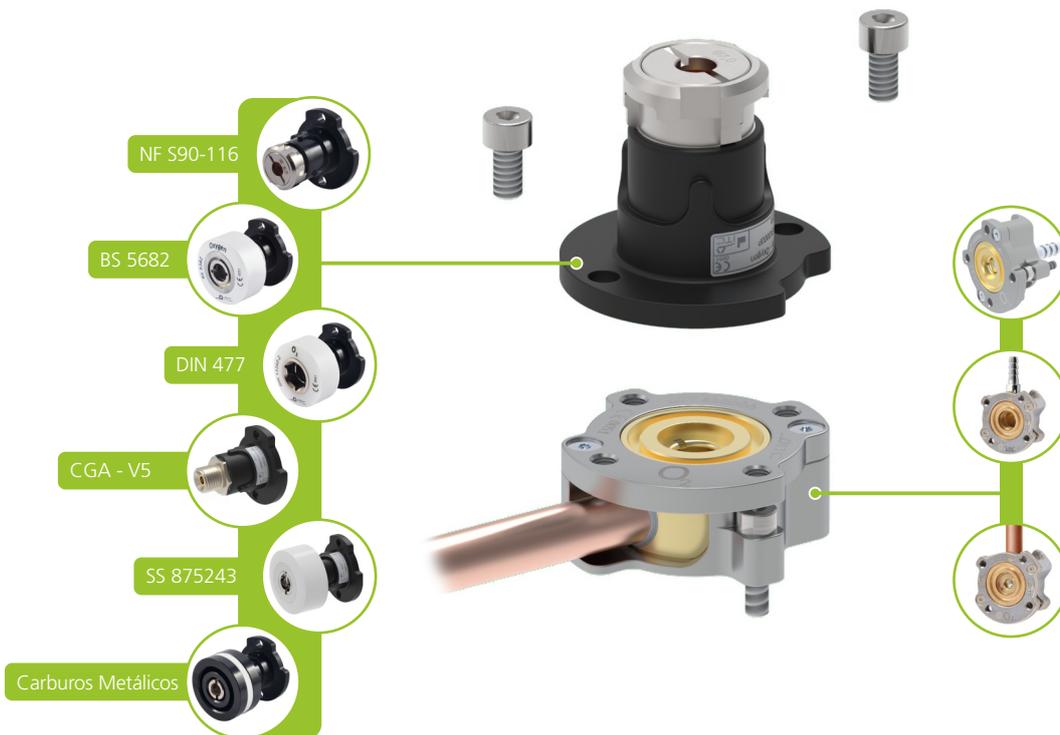

(Otras normas consultar)


- Fabricados según normas Europeas y Americanas.

Standard Type	Available	Standard Type	Available	Standard Type	Available	Standard Type	Available	Standard Type	Available	Standards Type	Available
SS 8752430	✓	ENV 737-6	AVAILABLE SOON	Nassetti	✗	NF S90-116/FD S90-119	✓	A5 2896	AVAILABLE SOON	ISO -9170-2	✓
BS 5682	✓	Fro	✗	CGA-V5 (DISS)	✓	OHMEDA	AVAILABLE SOON	UNI 9507	AVAILABLE SOON		
Carbuos Metálicos	✓	Boc Saccab	✓	ISO 18082 (NIST)	✓	CHEMETRON	AVAILABLE SOON	SANS 1409	AVAILABLE SOON		
DIN 13260-2	✓	JIS T 7101	AVAILABLE SOON	Manufacturas Médicas	✓	PURITAN BENNETT	AVAILABLE SOON	Oxifar	✗		


Características de Just Plug T

- Bases comunes a todas las normas, con válvula de retención y posibilidad de ajuste del ángulo de alimentación.
- Disponibles con tubo de cobre $\varnothing 10,0$ mm para soldar y salida a tubo flexible ($\varnothing 7,0 \times \varnothing_e 14,0$ mm para vacío y $\varnothing 6,0 \times \varnothing_e 12,0$ mm para el resto de gases).
- Posibilidad de montar la válvula en posición vertical u horizontal sin necesidad de desmontar la base.

ÁNGULO DE ENTRADA VARIABLE

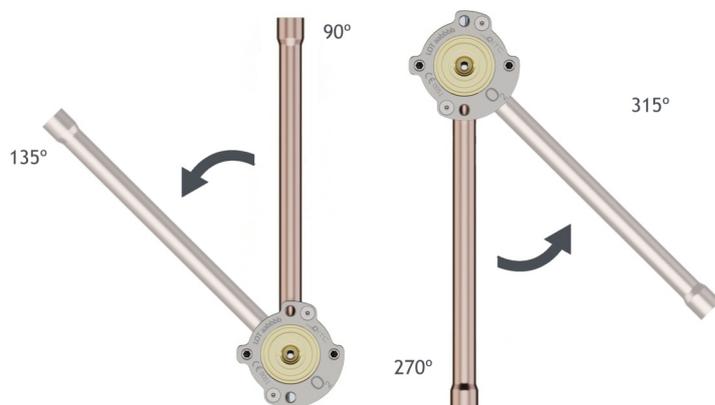


OPCIONES DE MONTAJE

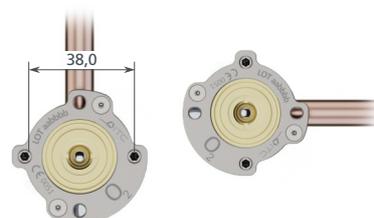

Girando la base 90° podemos mantener la posición del cabezal y aumentar el número de ángulos de entrada.

Fijación con dos tornillos M4.

MONTAJE CABEZAL-BASE

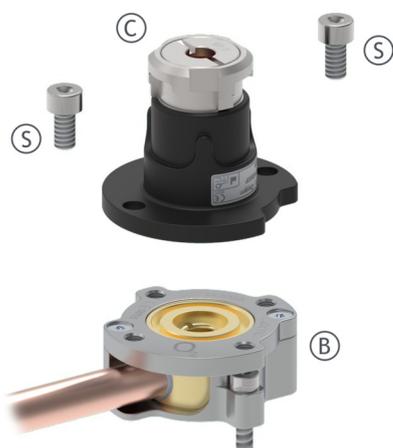


Montaje de cabezal (C) en la base (B) mediante únicamente dos tornillos (S).


Fácil intercambiabilidad de cabezales y normas, gracias a la base común.

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARA CABECERO


Altura mínima de colocación de la válvula

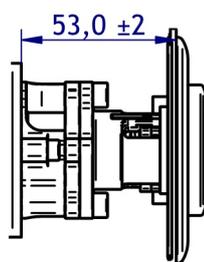


Mecanizado de la tapa

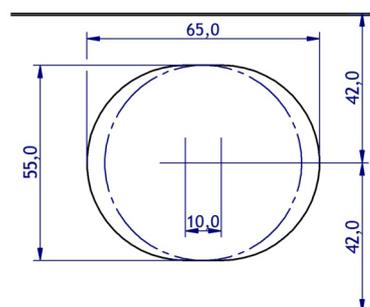


ACCESORIOS

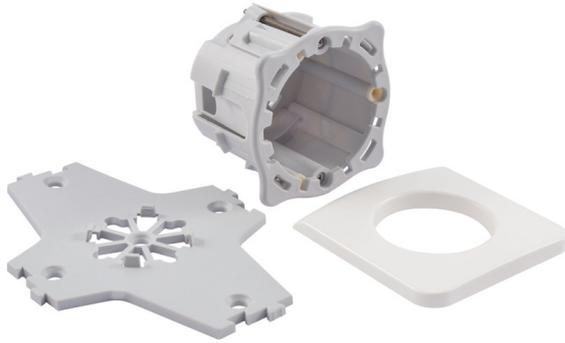

Caja para empotrar

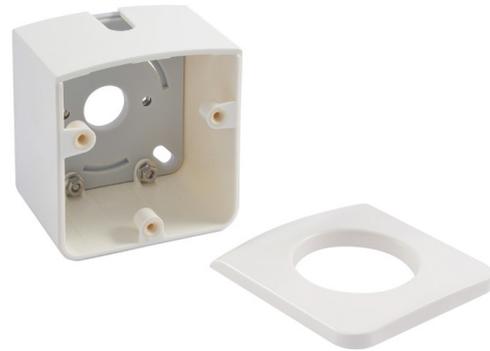

Caja de superficie

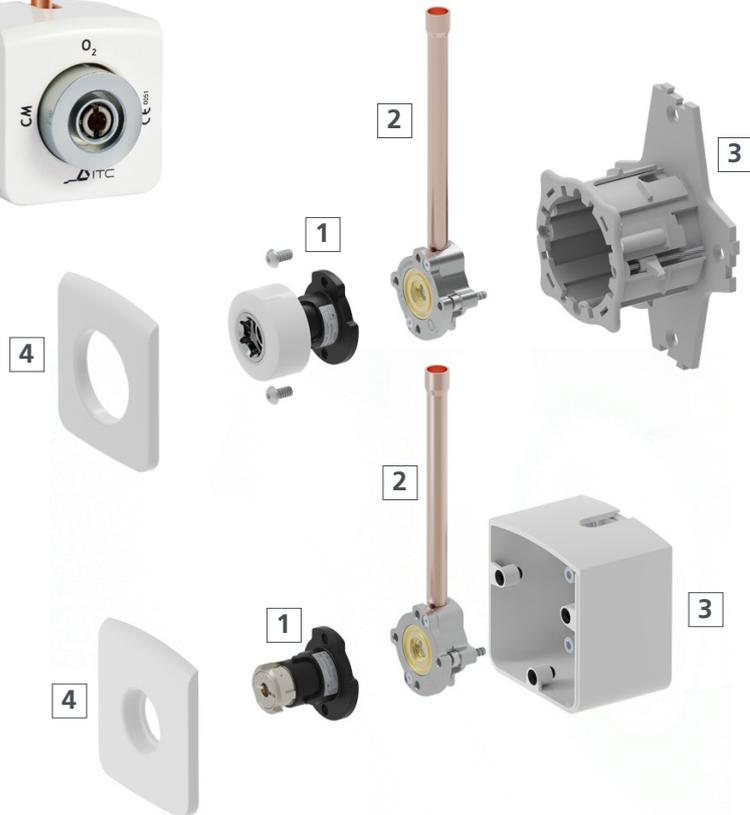

- | | |
|---|--------------|
| 1 | Cabezal |
| 2 | Base |
| 3 | Caja |
| 4 | Embellecedor |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:	Latón cromado, acero inoxidable, poliamida, ABS y NBR
Normas:	NF S 90-116, DIN 13260-2, BS 5682, SS 87 524 30, CGA V-5 (DISS) Tipo Carburos Metálicos, otras normas consultar